

NutriMirim

FLUXO PRINCIPAL

Abertura > Login > Início > Nova Avaliação > Cadastro > Medidas > Resultado > Curva de Crescimento

Recuperação de senha: Login > Esqueci minha senha > Informar e-mail > Link enviado > Nova senha

TELAS

01 Tela de abertura

02 Login

03 Início

04 Nova Avaliação

05 Cadastro da Criança

06 Registro de Medidas

02A–02C Recuperação de senha

07 Resultado

08 Curva de Crescimento

09 Histórico

10 Dados da criança

11 Perfil Profissional

12 Cadastro de Crianças

Link Figma:

<https://www.figma.com/design/u1BqhfhhS7qt5TZJl6dqtT/NutriMirim-%E2%80%94-Prot%C3%B3tipo-de-Alta-Fidelidade?node-id=0-1&t=Yyy6HFHfp9hfipUx-1>

As siglas usadas no documento estão explicadas no glossário, na última página.



OBJETIVO

Primeira tela exibida ao abrir o aplicativo. Apresenta a marca NutriMirim e a proposta do projeto antes de o usuário acessar o sistema.

ELEMENTOS DA TELA


- **Logotipo:** uma criança com folhas brotando na cabeça, símbolo de crescimento saudável.
- **Slogan:** "A trena digital que mede o futuro das crianças brasileiras!".
- **Legenda:** "Monitoramento Nutricional Infantil", que resume a finalidade do app.
- **Fundo** com formas orgânicas em verde e azul-claro, que reforçam a identidade visual.
- **Barra de status** do celular (hora, sinal, Wi-Fi e bateria).

NAVEGAÇÃO

Dá acesso à tela de login.

TELA 02 Login

Bem-vindo ao NutriMirim

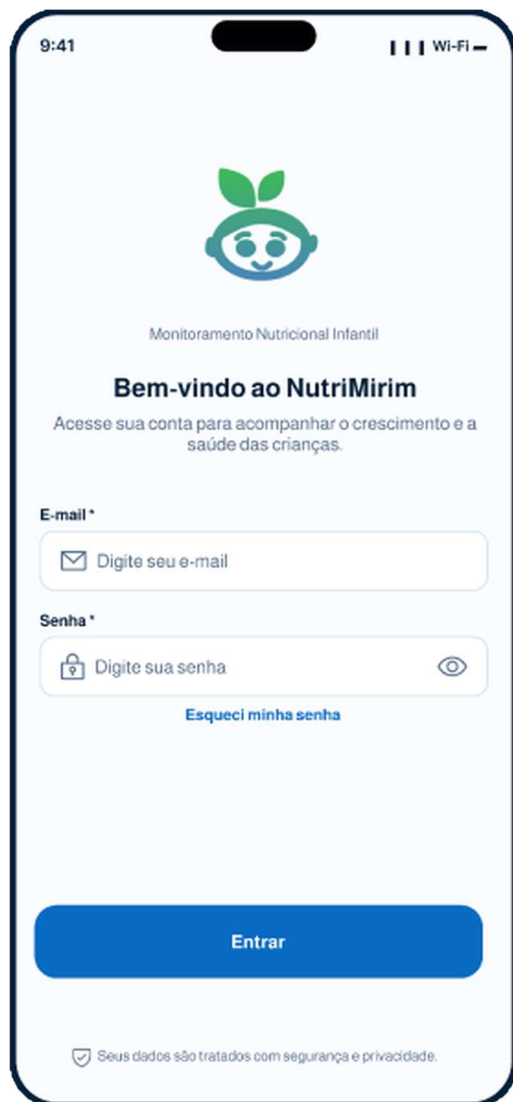

9:41 Wi-Fi



Monitoramento Nutricional Infantil

Bem-vindo ao NutriMirim

Acesse sua conta para acompanhar o crescimento e a saúde das crianças.

E-mail *

 Digite seu e-mail

Senha *

 Digite sua senha 

[Esqueci minha senha](#)

Entrar

 Seus dados são tratados com segurança e privacidade.

OBJETIVO

Autentica o profissional de saúde para que ele acesse os dados das crianças acompanhadas.

ELEMENTOS DA TELA

- **E-mail:** campo obrigatório, com ícone de envelope.
- **Senha:** campo obrigatório, com ícone de cadeado e botão de olho para mostrar ou ocultar o texto.
- **"Esqueci minha senha":** link para o fluxo de recuperação de senha.
- **Entrar:** botão principal, em destaque na cor azul da marca.
- **Aviso de privacidade:** "Seus dados são tratados com segurança e privacidade."

NAVEGAÇÃO

Ao entrar, o usuário chega ao menu Início.

TELA 02A Recuperação de senha

Informar e-mail ou telefone



OBJETIVO

Primeira etapa da recuperação de acesso: o usuário informa o e-mail ou o telefone cadastrado para receber um link de redefinição de senha.

ELEMENTOS DA TELA

- **Seta "Voltar"**: retorna à tela de login.
- **Logotipo e título**: identificam a marca e o fluxo "Recuperação de Senha".
- **Texto de orientação**: "Digite seu e-mail ou número de telefone para redefinir a senha!"
- **Campo Email**: recebe o contato cadastrado do usuário.
- **Continuar**: botão principal, na cor azul da marca.

NAVEGAÇÃO

Ao continuar, o app envia o link de recuperação e exibe a tela de confirmação de envio.

TELA 02B Recuperação de senha

Confirmação de envio



OBJETIVO

Informa que o link de recuperação foi enviado, para que o usuário siga as instruções recebidas.

ELEMENTOS DA TELA

- **Seta "Voltar"**: permite retornar à etapa anterior.
- **Logotipo e título**: mantêm a identidade visual do fluxo.
- **Mensagem de confirmação**: "Enviamos um link de recuperação para o seu e-mail ou sms."
- **Tela informativa**: não tem campos nem botões, pois a ação seguinte acontece fora do app, na caixa de entrada ou nas mensagens do celular.

NAVEGAÇÃO

O usuário abre o link recebido por e-mail ou SMS, que leva à criação da nova senha.

TELA 02C Recuperação de senha

Criação da nova senha



OBJETIVO

Última etapa do fluxo: o usuário define uma nova senha de acesso ao aplicativo.

ELEMENTOS DA TELA


- **Seta "Voltar"**: retorna à etapa anterior.
- **Nova senha**: campo para digitar a nova senha.
- **Confirme sua senha**: segundo campo, que evita erros de digitação ao repetir a senha.
- **Continuar**: botão principal que conclui a redefinição.

NAVEGAÇÃO

Ao continuar, a senha é alterada e o app exibe a confirmação "Senha alterada com sucesso!".

TELA 03 Início

Menu principal

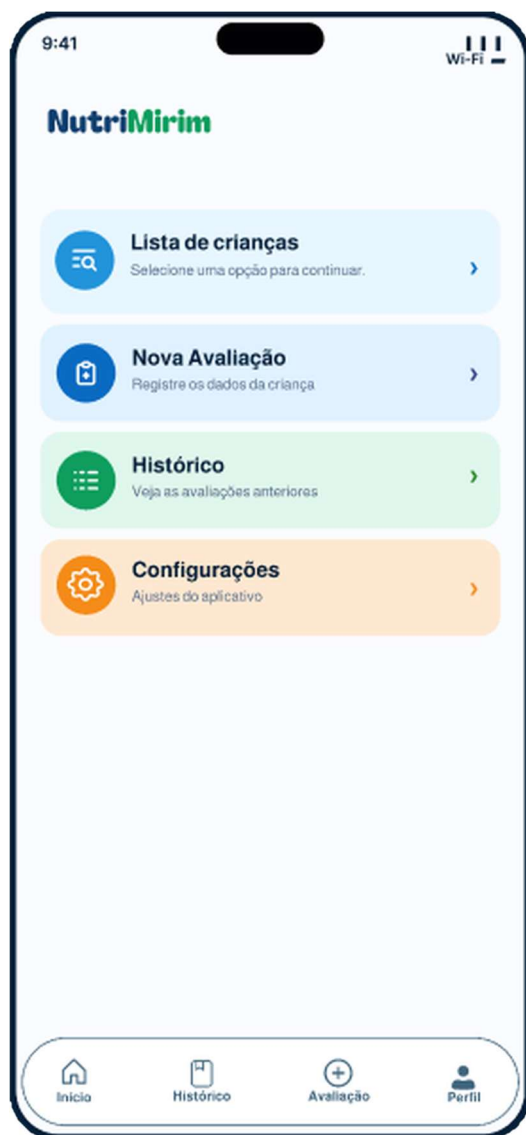

OBJETIVO

Concentra os atalhos para as principais funções do aplicativo.

ELEMENTOS DA TELA


- **Lista de crianças** (azul-claro): consulta as crianças cadastradas.
- **Nova Avaliação** (azul): inicia o registro de uma avaliação nutricional.
- **Histórico** (verde): reúne as avaliações anteriores.
- **Configurações** (laranja): ajustes do aplicativo.
- **Barra de navegação inferior**: Início, Histórico, Avaliação e Perfil, presente nas telas principais.

NAVEGAÇÃO

Cada cartão tem cor própria, o que ajuda a reconhecer a função rapidamente.

TELA 04 Nova Avaliação

Escolha do tipo de registro

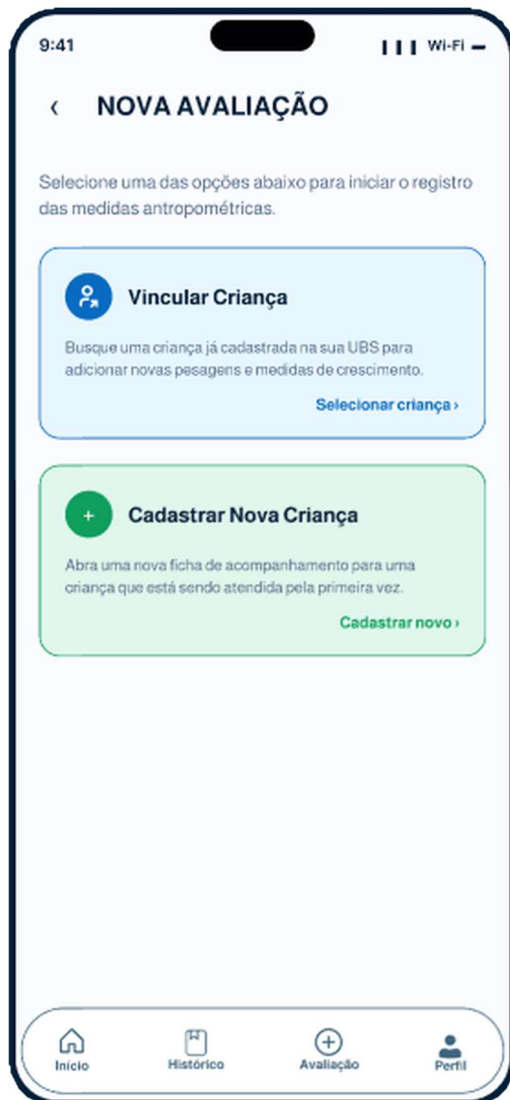

OBJETIVO

Primeiro passo do registro: o profissional informa se a criança já está cadastrada ou se é o primeiro atendimento.

ELEMENTOS DA TELA

- **Texto de orientação** sobre o registro das medidas antropométricas.
- **Vincular Criança** (azul): busca uma criança já cadastrada na UBS para adicionar novas pesagens e medidas, com a ação "Selecionar criança".
- **Cadastrar Nova Criança** (verde): abre uma ficha nova para a criança atendida pela primeira vez, com a ação "Cadastrar novo".
- **Seta de voltar** e barra de navegação inferior.

NAVEGAÇÃO

Criança nova segue para o Cadastro da Criança; criança já cadastrada segue direto para as medidas.

TELA 05 Cadastro da Criança

Ficha de identificação

9:41 Wi-Fi

< Cadastro da Criança

Dados de Identificação

Nome completo *
Digite o nome da criança

CPF da criança
000.000.000-00

Nascimento * Sexo *

DD/MM/AAAA Masculino Feminino

Bairro * UBS de Referência *

Ex.: Centro Selezione

Responsável legal *

Nome do pai, mãe ou tutor

CPF Responsável * Contato *

000.000.000-00 (00) 00000-0000

Salvar e Continuar

OBJETIVO

Registra os dados de identificação da criança e do responsável legal.

ELEMENTOS DA TELA

- **Dados de identificação:** nome completo, CPF, data de nascimento, sexo (botões Masculino e Feminino), bairro e UBS de referência.
- **Responsável legal:** nome, CPF e contato.
- Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.
- **Salvar e Continuar:** botão principal no rodapé.

NAVEGAÇÃO

Depois de salvar, o fluxo segue para o Registro de Medidas.

TELA 06 Registro de Medidas

Medidas antropométricas

9:41 Wi-Fi

< Registro de Medidas

Medidas antropométricas

Peso (kg) *

Ex.: 12,5

Altura/Comprimento (cm) *

Ex.: 85,0

Data da medição

DD/MM/AAAA

Calcular

OBJETIVO

Coleta as medidas da criança que serão usadas no cálculo do estado nutricional.

ELEMENTOS DA TELA


- **Peso (kg):** campo obrigatório, com exemplo de preenchimento (12,5).
- **Altura/Comprimento (cm):** campo obrigatório, com exemplo (85,0). O mesmo campo atende crianças medidas deitadas ou em pé.
- **Data da medição:** campo de data no formato DD/MM/AAAA.
- **Calcular:** botão principal que processa as medidas.

NAVEGAÇÃO

Ao calcular, o app exibe a tela de Resultado.

TELA 07 Resultado

Estado nutricional

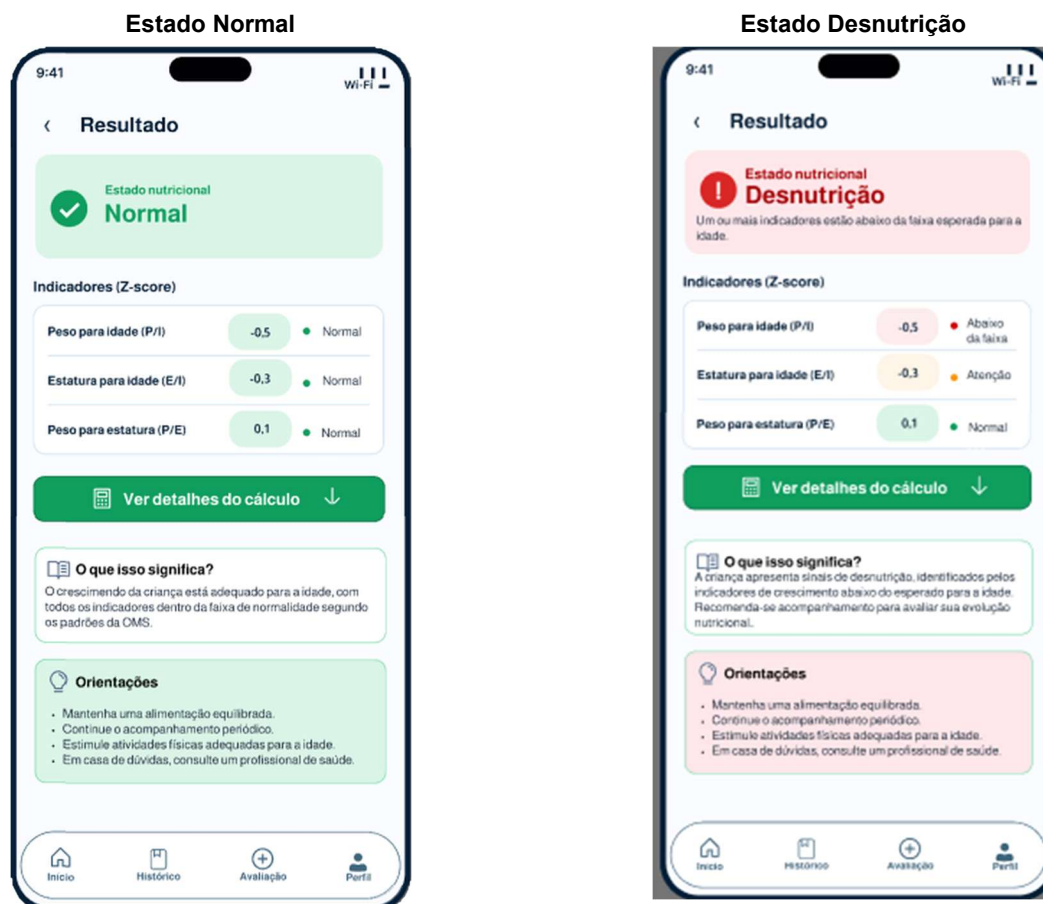

OBJETIVO

Mostra a classificação nutricional da criança a partir das medidas informadas. A tela tem duas variações, conforme o resultado.

ELEMENTOS DA TELA

- **Cartão "Estado nutricional":** verde com ícone de confirmação quando o estado é Normal; vermelho com ícone de alerta e mensagem explicativa quando há Desnutrição.
- **Indicadores (Z-score):** Peso para idade (P/I), Estatura para idade (E/I) e Peso para estatura (P/E), cada um com valor e situação (Normal, Atenção ou Abaixo da faixa).
- **Ver detalhes do cálculo:** botão para consultar como o resultado foi obtido.
- **O que isso significa?:** explicação do resultado em linguagem simples.
- **Orientações:** recomendações de acompanhamento e cuidado.

NAVEGAÇÃO

As cores (verde, laranja e vermelho) permitem identificar a situação da criança logo de início.

TELA 08 Curva de Crescimento

Gráfico de acompanhamento



OBJETIVO

Apresenta a evolução da criança em gráfico, comparando suas medidas com curvas de referência.

ELEMENTOS DA TELA

- **Abas:** Peso/Idade, Altura/Idade e Peso/Altura, para alternar entre os gráficos.
- **Gráfico "Peso para idade (kg)"** (menina, 0 a 5 anos), com curvas de referência de -3 a +3 escores z, em cores diferentes.
- **Ponto da criança** destacado, com balão informando idade, peso e data (24 meses, 9,8 kg, 15/08/2026).
- **Última avaliação:** idade, peso, Z-score (-1,31), percentil (10^o) e classificação (Normal).
- **Gerar relatório:** botão secundário para emitir o relatório.


NAVEGAÇÃO

Permite ao profissional visualizar a tendência de crescimento ao longo do tempo.

TELA 09

Histórico

Avaliações anteriores

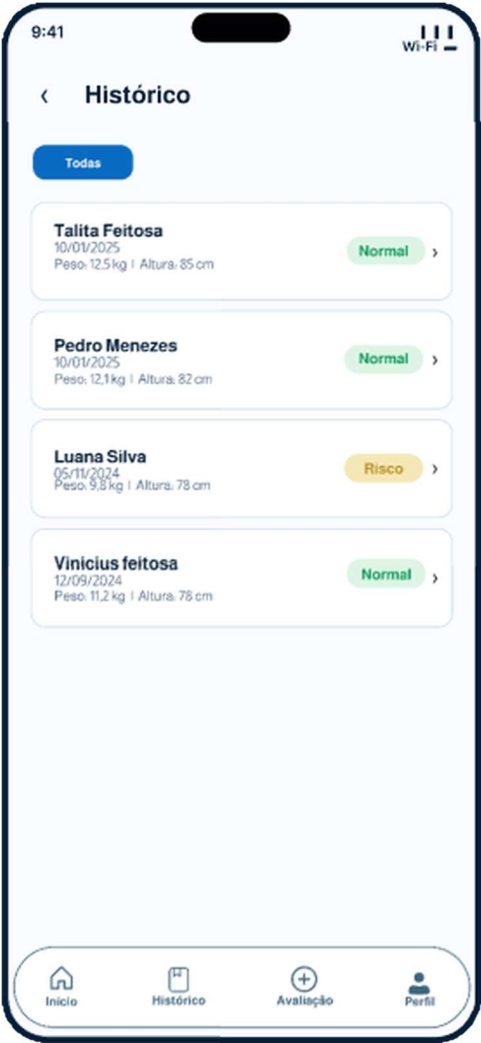

OBJETIVO

Lista as avaliações já realizadas, da mais recente para a mais antiga.

ELEMENTOS DA TELA

- **Filtro "Todas"** no topo da lista.
- **Cartões de avaliação:** nome da criança, data, peso e altura registrados.
- **Selo de situação:** "Normal" em verde e "Risco" em amarelo, para leitura rápida.
- **Seta** à direita, que leva aos detalhes da criança.

NAVEGAÇÃO

Serve de ponto de partida para rever o acompanhamento de cada criança.

TELA 10 Dados da criança

Perfil da criança

9:41 Wi-Fi

< Dados da criança

Maria Joaquina de Lima Santos

Endereço Rua Lais grangeiro, 254

UBS Vinculada UBS Jardim das Flores

Data de nascimento 15/08/2024

Última avaliação 15/08/2026

[Editar dados](#)

Última avaliação 15/08/2026

Idade	Peso	Z-Score	Percentil	Classificação
24 meses (2 anos)	9,8 kg	-1,31	10º	Normal

[Ver histórico](#)

Curva de Crescimento →

Dados do Responsável

Joana de Lima Santos

CPF: 857.***-54

(79) 12345-678

maria@email.com

Registrar Avaliação →

Início Histórico Avaliação Perfil

OBJETIVO

Reúne em uma tela todas as informações de uma criança e de seu responsável.

ELEMENTOS DA TELA


- **Cartão de identificação:** nome, endereço, UBS vinculada, data de nascimento e data da última avaliação, com o link "Editar dados".
- **Última avaliação:** idade, peso, Z-score, percentil e classificação, com o link "Ver histórico".
- **Curva de Crescimento:** botão que abre o gráfico da criança.
- **Dados do Responsável:** nome, CPF parcialmente oculto, telefone e e-mail.
- **Registrar Avaliação:** botão para iniciar uma nova medição.

NAVEGAÇÃO

A tela liga o cadastro, o histórico, a curva de crescimento e o registro de uma nova avaliação.

TELA 11 Perfil Profissional

Área do agente de saúde

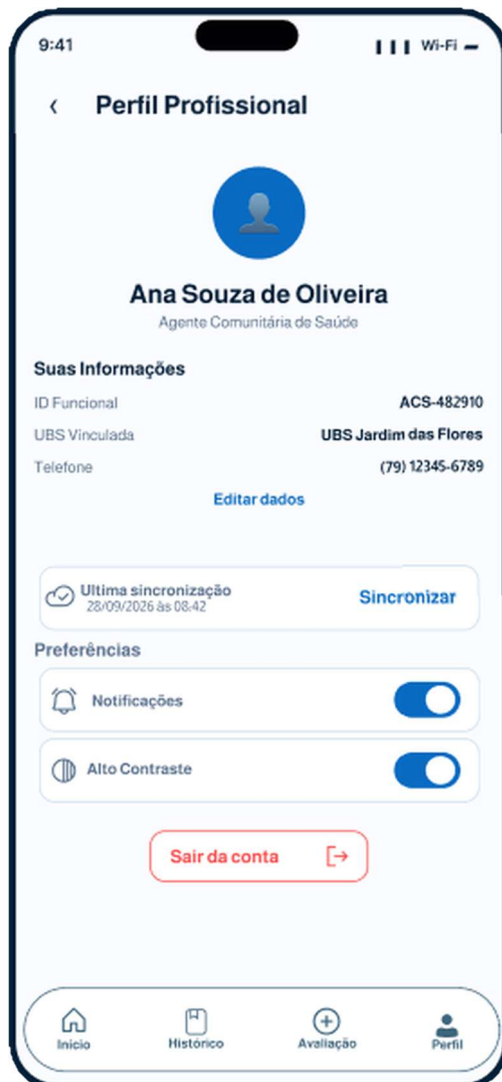

OBJETIVO

Mostra os dados do profissional logado e as opções de uso do aplicativo.

ELEMENTOS DA TELA


- **Identificação:** foto, nome e função (Agente Comunitária de Saúde).
- **Suas Informações:** ID funcional, UBS vinculada e telefone, com o link "Editar dados".
- **Sincronização:** data e hora da última sincronização e botão "Sincronizar", útil para o uso em campo.
- **Preferências:** chaves liga/desliga para Notificações e Alto Contraste (acessibilidade).
- **Sair da conta:** botão em vermelho, que sinaliza uma ação de saída.

NAVEGAÇÃO

Concentra as configurações pessoais e a manutenção dos dados do usuário.

TELA 12 Cadastro de Crianças

Lista de crianças

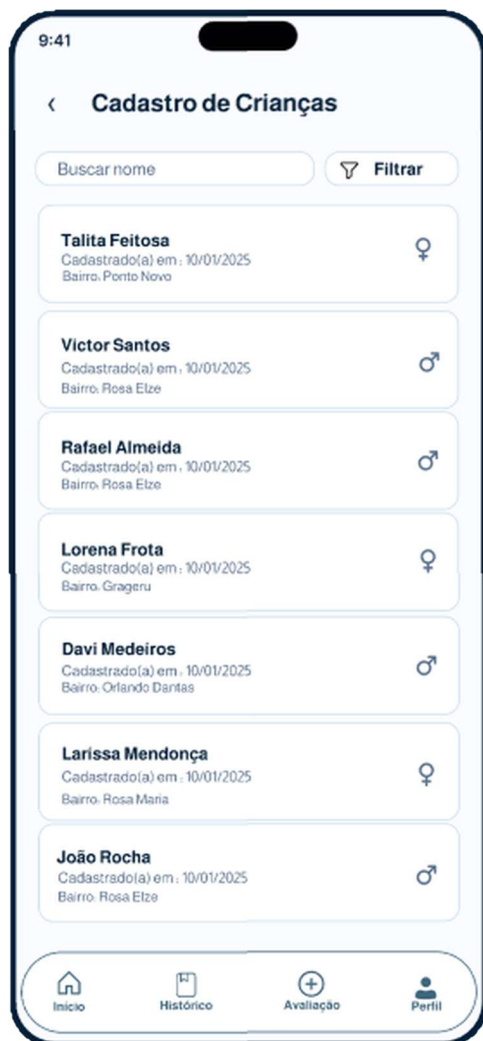

OBJETIVO

Lista as crianças cadastradas para consulta e seleção.

ELEMENTOS DA TELA

- **Busca por nome** e botão **Filtrar**, para localizar uma criança rapidamente.
- **Cartões**: nome, data do cadastro e bairro de cada criança.
- **Ícone de sexo** (feminino ou masculino) à direita de cada cartão.
- **Barra de navegação inferior** para as demais áreas do app.

NAVEGAÇÃO

Ao tocar em uma criança, o usuário acessa a tela de Dados da criança.

Glossário

UBS

Unidade Básica de Saúde, serviço de atenção primária onde a criança é acompanhada.

ACS

Agente Comunitário de Saúde, profissional que usa o aplicativo no atendimento às famílias.

OMS

Organização Mundial da Saúde, cujos padrões de crescimento infantil servem de referência para as curvas.

Antropometria

Conjunto de medidas do corpo, como peso e altura ou comprimento, usadas para avaliar o estado nutricional.

Z-score (escore z)

Indica quantos desvios-padrão o valor da criança está acima ou abaixo da mediana de referência para sua idade e sexo.

P/I

Peso para idade.

E/I

Estatura (altura ou comprimento) para idade.

P/E

Peso para estatura.

Percentil

Posição da criança em relação às demais de mesma idade e sexo. O 10º percentil indica que 10% das crianças de referência têm valor menor.

Classificação

Situação nutricional atribuída ao resultado, como Normal, Risco ou Desnutrição.